




# Motion C&G P X

Naudotojo vadovas

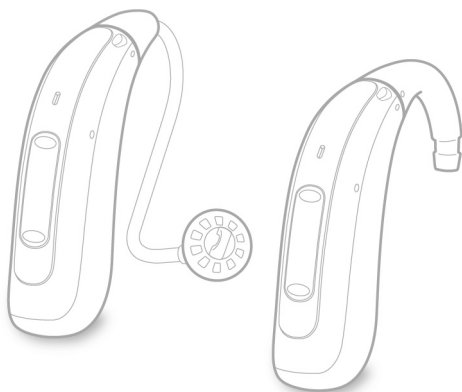

Made for  
 iPhone | iPad | iPod

# Turinys

<b>Ižanga</b>	<b>4</b>
<b>Jūsų klausos aparatai</b>	<b>5</b>
Prietaiso tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	6
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	7
Valdikliai	9
Klausos programos	10
Funkcijos	10
<b>Kasdienis naudojimas</b>	<b>11</b>
Įkrovimas	11
Įjungimas ir išjungimas	12
Budėjimo režimo įjungimas	14
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	15
Garsumo nustatymas	19
Klausos programos keitimas	20
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	20
<b>Ypatingos klausymosi sąlygos</b>	<b>21</b>
Kalbant telefonu	21
Garso transliacija naudojant iPhone	22
Klausos aparatų lėktuvo režimas	22
Garso indukcinės kilpos	23

<b>Techninis aptarnavimas ir priežiūra</b>	<b>24</b>
Klausos aparatai	24
Į ausį kišamos dalys ir vamzdeliai	26
Specialistų atliekama techninė priežiūra	29
<b>Svarbi informacija apie saugą</b>	<b>30</b>
<b>Tolesnė informacija</b>	<b>33</b>
Informacija saugos klausimais	33
Priedai	33
Eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos	33
Informacija apie įrenginio likvidavimą	35
Šio dokumento simboliai	35
Trikčių diagnostika	36
Su šalimi susijusi informacija	37
Techninė priežiūra ir garantija	39

# Įžanga

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet koki kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



## **PERSPĖJIMAS**

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.



Prieš pirmą kartą naudodami savo klausos aparatus, juos visiškai įkraukite. Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais.

# Jūsų klausos aparatai

**i**

Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

## Prietaiso tipas

Jūsų klausos aparatai yra BTE (užausiniai) modeliai. Vamzdelis perduoda garsą iš klausos aparato į ausį. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Į jūsų klausos aparatą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Jis leidžia lengvai krauti naudojant mūsų standartinį įkroviklį arba pasirenkamą įkroviklį, Dry&Clean Charger.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologinės funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.

Jūsų klausos aparatuose veikia Bluetooth® low energy\* technologija, leidžianti keistis duomenimis naudojant išmanųjį telefoną ir sklandžiai transliuoti garsą naudojant iPhone\*\*.

\* Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir bet koks tokių teisėto gamintojo ženklų naudojimas galimas tik pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

\*\* iPad, iPhone ir iPod yra Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

## Susipažinimas su klausos aparatu


Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir atkreipkite dėmesį, kurioje aparato vietoje jie yra. Dėl to, kai nešiosite klausos aparatą, valdiklius galėsite apčiuopti ir paspausti lengviau.

**i**

Jeigu įsidėjęs klausos aparatą sudėtinga spaudinėti valdiklius, galite pasiteirauti savo klausos specialisto, ar aparatą galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu arba išmaniojo telefono programėle.

## Sudedamosios dalys ir pavadinimai

Jūsų klausos aparatas yra pritvirtintas prie už ausies tvirtinamo ragelio ir pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalies arba prie standartinio vamzdelio (ThinTube) ir standartinės į ausį kišamos dalies (LifeTip).

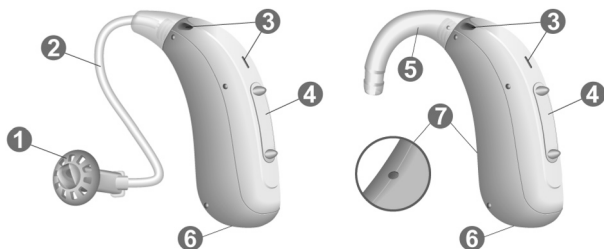


- 
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 Į ausį kišama dalis   | 5 Už ausies tvirtinamas ragelis |
| 2 Vamzdelis (ThinTube)  | 6 Įkrovimo kontaktas            |
| 3 Mikrofono angos   | 7 Šoninis indikatorius          |
| 4 Klavišinis jungiklis (valdymas, įjungimo / išjungimo jungiklis) |                                 |
- 

Galite naudoti standartinės į ausį kišamos dalis kartu su standartiniu vamzdeliu arba pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamos dalis kartu su už ausies tvirtinamu rageliu ir vamzdeliu.

Galite lengvai pakeisti standartines į ausį kišamas dalis ir išvalyti standartinį vamzdelį. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.


**Standartinės į ausį kišamos dalys /  
vamzdeliai**

**Dydis**

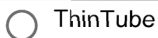

**Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys**

Pavyzdžiui:

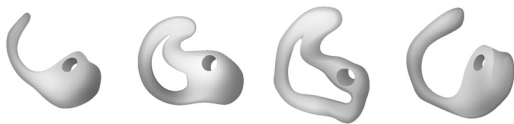



## Valdikliai

Naudodami klavišinį jungiklį galite, pvz., perjungti klausyimosi programas. Klausos specialistas užprogramavo klavišiniam jungikliui jūsų pageidautas funkcijas.

<b>Klavišinio jungiklio funkcijos</b>	<b>L</b>	<b>R</b>
<b>Paspauskite trumpai:</b>		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Laikykite nuspaudę apie 2 sekundes:</b>		
Programa aukštyn / žemyn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas / mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Laikykite paspaudę ilgiau nei 3 sekundes:</b>		
Įjungimas / išjungimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = į kairę, R = į dešinę

**i**

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį klausos programoms keisti ir klausos aparatų garsumui reguliuoti. Naudodamiesi mūsų išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

## Klausos programos

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Daugiau skaitykite skyriuje „Klausos programos keitimas“.

## Funkcijos

- Ūžesio terapijos funkcija** sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.

## Kasdienis naudojimas

Kad klausos aparatais būtų patogu ir paprasta naudotis, jie turi integruotą valdymo elementą. Be to, siūlome „Android“ ir „iPhone“ programėlę, kuri leidžia dar lengviau valdyti įrenginius. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti išmaniojo telefono programėlę, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

## Įkrovimas

Galite rinktis iš dviejų įkroviklių: standartinį įkroviklį tik krovimui arba pasirenkamą įkroviklį, Dry&Clean Charger.

Savo klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

- ▶ Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais. Įkroviklio naudotojo vadove taip pat galite rasti naudingų krovimo patarimų.



## Pranešimas apie mažą energijos kiekį

Girdėsite įspėjamąjį signalą, nurodantį, kad maitinimo elementas baigia išsieikvoti. Signalas bus kartojamas kas 20 minučių. Atsižvelgiant į klausos aparatų naudojimą, jiems įkrauti turite maždaug 1,5 val. – po to aparatai nustos veikti.

Turėkite omenyje, kad maitinimo elementas veikia trumpiau, jei vienu metu naudojama daug funkcijų.

## Ijungimas ir išjungimas

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

Įkrovikliu:

- ▶ Įjungimas: Išimkite aparatus iš įkroviklio.  
Jūsų klausos aparatuose leidžiama paleidimo melodija. Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.
- ▶ Išjungimas: Klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

Atminkite, kad įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Daugiau informacijos rasite įkroviklio naudotojo vadove.

Naudojant klavišinį jungiklį:

- ▶ Įjungimas: Nuspaudę laikykite klavišinio jungiklio apatinę dalį, kol pradės groti paleidimo melodija. Kol melodija groja, atleiskite klavišinį jungiklį.



Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

- ▶ Išjungimas: Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite viršutinę arba apatinę klavišinio jungiklio dalį. Pradės groti išjungimo melodija.



Taip pat žr. įkroviklio naudotojo vadove pateiktus krovimo patarimus.

## Budėjimo režimo įjungimas

Nuotolinio valdymo pultu ar išmaniojo telefono programėle savo klausos aparatus galite perjungti į budėjimo režimą. Taip klausos aparatai nutildomi. Išėjus iš budėjimo režimo, nustatomas **anksčiau** naudotas garsumas ir klausos programa.

Pastaba.

- Veikiant budėjimo režimui, klausos aparatai **nėra** visiškai išjungti. Jis vartoja šiek tiek energijos.  
Todėl budėjimo režimą rekomenduojame naudoti tik trumpai.
- Jei norite išeiti iš budėjimo režimo, bet nuotolinio valdymo pultu ar programėlės naudoti negalite: klausos aparatus išjunkite ir vėl įjunkite (klavišiniu jungikliu arba trumpam įdėdami į įkroviklį, kol pradės šviesti vienas ar keli žali LED diodai). Tokiu atveju nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

## Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:


- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.



Klausos aparato įdėjimas:

- ▶ Laikykite vamzdelį prie pat į ausį kišamos dalies.
- ▶ Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ①.
- ▶ Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.

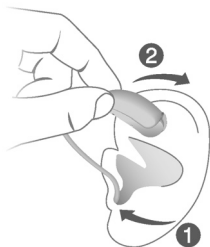

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkelkite virš viršutinės ausies dalies ②.



### **PERSPĖJIMAS**

Pavojus susižeisti!


- ▶ Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.

**i**

- Gali būti patogiau **dešiniąjį** klausos aparatą dėti **dešiniąja** ranka, o **kairiųjų** – **kairiąja**.
- Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.


Papildomas fiksatorius naudojamas į ausį įkišamai daliai ausyje įtvirtinti. Kaip pritvirtinti pasirinktinę prilaikymo juostelę:

- ▶ Sulygiuokite prilaikymo juostelę su plokščiuoju imtuvo galu.

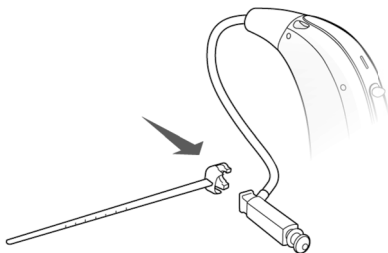



- ▶ Tada spauskite prilaikymo juostelę link imtuvo, kol ji spragtelės ir užsifiksuos.

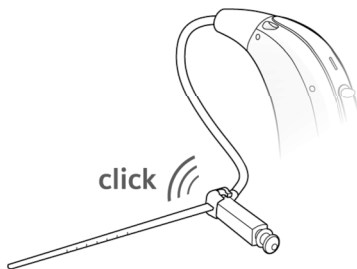


Norėdami nustatyti fiksatoriaus padėtį, darykite taip:

- ▶ Sulenkite fiksatorių ir atsargiai įstatykite jį į ausies įdubos dugną (žr. paveikslėlyje).



Klausos aparato išėmimas:

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkelkite virš viršutinės ausies dalies ❶.
- ▶ Laikykite vamzdelį prie pat į ausį kišamos dalies ir atsargiai ištraukite į ausį kišamą dalį ❷.

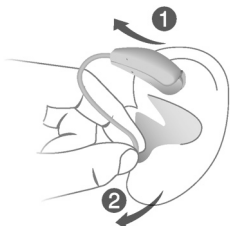

### **PERSPĖJIMAS**

Pavojus susižeisti!

- ▶ Labai retais atvejais išimant klausos aparatą ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir nudžiovinkite. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

## **Garsumo nustatymas**

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- ▶ Jei norite reguliuoti garsą patys, paspauskite viršutinę klavišinio jungiklio dalį, kad pagarsintumėte, arba apatinę, kad patylintumėte.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

## **Klausos programos keitimas**

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- ▶ Jei norite pakeisti klausos programą, trumpai paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“. Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.

## **Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)**


Taip pat galite naudoti klausos aparato valdiklius kitoms ypatybėms keisti, pavyzdžiui, užesio terapijos signalo lygiui reguliuoti.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

# Ypatingos klausymosi sąlygos

## Kalbant telefonu

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.

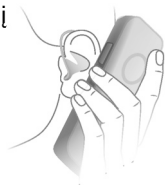

## Kalbėjimo telefonu programa

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa.

## **Garso transliacija naudojant iPhone**

Jūsų klausos aparatai yra **Made for iPhone** (pritaikyti iPhone) klausos aparatai. Tai reiškia, kad naudodami klausos aparatus galite atsiliepti į skambučius ir klausytis muzikos iš iPhone.

Norėdami daugiau informacijos apie su iOS suderinamus įrenginius, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

## **Klausos aparatų lėktuvo režimas**

Lėktuvo režimas būna tuomet, kai klausos aparatų Bluetooth išjungtas. Vietose, kuriose Bluetooth technologiją naudoti uždrausta (pvz., kai kuriuose lėktuvuose), galite išjungti Bluetooth režimą. Tokiu būdu jūsų klausos aparatuose laikinai išjungiamas Bluetooth ryšys. Klausos aparatai veiks ir toliau be Bluetooth ryšio, tačiau tiesioginis garso perdavimas srautu ir kitos funkcijos neveiks.

- ▶ Norėdami įjungti arba išjungti Bluetooth režimą, naudokite išmaniojo telefono programėlę.

Apie išjungtą arba įjungtą Bluetooth režimą praneša įspėjamasis garsinis signalas.

## Garso indukcinės kilpos

Kai kuriuose telefonuose ir viešosiose vietose, pvz., teatruose, galima garso signalo (muzikos arba kalbos) per garso indukcinę kilpą paslauga. Naudojant šią sistemą klausos aparatai tiesiogiai priima pageidaujama signalą, bet aplinkos garsas neiškraipomas.

Jeigu naudojama garso indukcinės kilpos sistema, apie tai dažniausiai informuojama atitinkamais ženklais.



Kur bebūtumėte su garso indukcinė kilpa:

- ▶ Įjunkite teleritės programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar teleritės programa sukonfigūruota jūsų klausos aparatui.

### Teleritės programa ir nuotolinio valdymo pultelis



#### **PASTABA**

Skirta tik belaidžio ryšio funkciją turintiems aparatams:

suaktyvinus indukcinės ritės (teleritės) programą, dėl nuotolinio valdymo pultelio gali būti girdimas ritmingas garsas.

- ▶ Naudokite nuotolinio valdymo pultelį didesniu nei 10 cm (4 col.) atstumu.

# Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

## Klausos aparatai

### Valymas

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- ▶ Klausos aparatus valykite kasdien, švelniu ir sausu audiniu.
- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkitė prietaisų į vandenį.
- ▶ Valydami niekada nespauskite.
- ▶ Nenaudokite alkoholio pagrindo skiediklio įkrovimo kontaktams.
- ▶ Kad išvengtumėte korozijos naudokite minkštą ir sausą servetėlę prakaitui ar skysčiui nušluostyti nuo įkrovimo kontaktų arba klausos aparatų prieš įstatydami juos į įkroviklį.
- ▶ Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiųjų priežiūros rinkinių ir išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti klausos aparatus tinkamos būklės.





## Džiovinimas

Dėl rekomenduojamų džiovinimo produktų ir asmeninių nurodymų, kada džiovininti klausos aparatus, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

## Laikymas

- Trumpalaikis laikymas (iki kelių dienų). Klausos aparatus išjunkite klavišiniu jungikliu arba įdėkite juos į įkroviklį, į kurį tiekama elektros energija.

Įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Jei įkroviklis prie maitinimo šaltinio neprijungtas ir į jį įdedate klausos aparatus, jie **neišjungiami**.

Atkreipkite dėmesį, kad kai klausos aparatus išjungiame nuotolinio valdymo pultu ar išmaniojo telefono programėle, klausos aparatai nėra **visiškai** išjungiami. Jie veikia budėjimo režimu ir vis dar vartoja šiek tiek energijos.

- Ilgalaikis laikymas (savaites, mėnesius ir t. t.). Pirmiausia savo klausos aparatus visiškai įkraukite. Prieš palikdami nenaudojamą, išjunkite jį klavišiniu jungikliu. Klausos aparatus laikant nenaudojamus, rekomenduojame naudoti džiovinimo produktus.

Kas 6 mėnesius klausos aparatus reikia įkrauti, kad nepataisomai per daug neišsikrautų maitinimo elementas. Per daug išsikrovusių maitinimo elementų krauti nebegalima ir juos reikia pakeisti. Krauti rekomenduojame dažniau nei kas 6 mėnesius.

Laikykitės laikymo sąlygų, nurodytų skyriuje „Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“.

## **Į ausį kišamos dalys ir vamzdeliai**

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė.

- Skirta klausos aparatams su standartiniu vamzdeliu (ThinTube):

Į ausį kišamas dalis valykite kasdien, o vamzdelius, kai reikia.

Į ausį kišamas dalis ir vamzdelius keiskite maždaug kas tris šešis mėnesius arba anksčiau, jeigu pastebėjote įtrūkimų arba kitų pakitimų.

- Skirta klausos aparatams su už ausies tvirtinamu rageliu:


Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

Paprašykite klausos specialisto, kad išvalytų vamzdelius arba, jeigu reikia, pakeistų į ausį kišamas dalis ir vamzdelius.

## Į ausį kišamų dalių valymas

- ▶ Išėmę į ausį kišamas dalis, nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.

Taip ausų siera neprisidžius ir nesukietės.

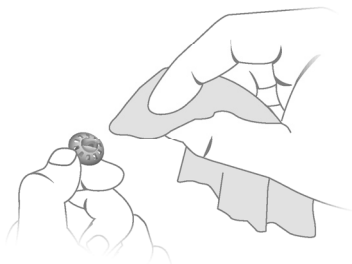

- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite į ausį kišamos dalies į vandenį.


**i**

Pasirenkamas įkroviklis, Dry&Clean Charger, valo UV spinduliais ir džiovina vamzdelius bei ausines, įkraudamas klausos aparatus.

Jei reikia daugiau informacijos, klauskite klausos specialisto, kuris variantas jums labiau tinka.

## Standartinių į ausį kišamų dalių keitimas (LifeTip)

- ▶ Ištraukite naudotą į ausį kišamą dalį ir prijunkite naują į ausį kišamą dalį.

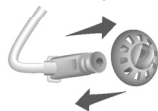

## Standartinių vamzdelių pakeitimas

- ▶ Atsukite naudotą vamzdelį nuo klausos aparato.



- ▶ Prisukite naują vamzdelį.

## **Specialistų atliekama techninė priežiūra**

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą ir atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis ir ausų sieros filtrus prareikus turi keisti jūsų klausos specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų rekomendacijos jums dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

## Svarbi informacija apie saugą

Šiame skyriuje pateikiama svarbi saugos informacija, susijusi su maitinimo elementu. Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su klausos aparatais pridedamą saugos instrukciją.



### ĮSPĖJIMAS

Į jūsų prietaisą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Netinkamai naudojant prietaisą, įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas gali sprogti.

Sužeidimo, gaisro arba sprogo pavojus!

- ▶ Laikykitės šiame skyriuje pateiktų įkraunamų ličio jonų maitinimo elementų saugos nurodymų.



### ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- ▶ Prijunkite įkroviklį naudodami tik USB maitinimo šaltinį, atitinkantį IEC 60950-1 ir / arba IEC 62368-1 reikalavimus.



## ĮSPĖJIMAS

- ▶ Laikykitės naudojimo sąlygų.
- ▶ Būkite itin atidūs ir prietaisą saugokite nuo didelio karščio (pvz., ugnies, mikrobangų krosnelės, indukcinės krosnelės ir kitų didelės indukcijos laukų) bei saulės šviesos.
- ▶ Klausos aparatus kraukite tik patvirtintu įkrovikliu. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.
- ▶ Prietaiso neardykite.
- ▶ Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje.
- ▶ Nenaudokite deformuotų ar aiškiai pažeistų prietaisų.
- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei jo veikimas po krovimo labai suprastėja. Grąžinkite prietaisą savo klausos priežiūros specialistui.
- ▶ Neišmeskite prietaiso į ugnį arba vandenį.



## ĮSPĖJIMAS

- ▶ Keitimo ir remonto darbus turi atlikti specialistas. Todėl:
- ▶ Neremontuokite ir nekeiskite įkraunamo ličio jonų maitinimo elemento patys.
- ▶ Jei mažai tikėtiniu atveju įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas sprogtų, visas degias medžiagas laikykite atokiau.

Visais pirmiau paminėtais atvejais grąžinkite prietaisus klausos priežiūros specialistui.



# Tolesnė informacija

## Informacija saugos klausimais

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridedamą saugos instrukciją.

## Priedai

Galite naudoti programėlę smartphone app, su kuria galite savo klausos aparatus patogiai valdyti nuotoliniu būdu. Naudodami programėlę taip pat galite išjungti signalinius tonus, kurti asmeninius garso profilius ir atlikti daugelį kitų funkcijų.

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

## Eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos

Klausos aparatai veikia toliau nurodytomis aplinkos sąlygomis (taip pat galioja tarp naudojimo ciklą).

<b>Eksploatavimo sąlygos</b>	<b>Iškrovimas</b>	<b>Įkrovimas</b>
Temperatūra	Nuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 122 °F)	Nuo 10 iki 35 °C (nuo 50 iki 95 °F)
Santykinis drėgnis	5–93 %	20–75 %
Atmosferos slėgis	Nuo 700 iki 1060 hPa	Nuo 700 iki 1060 hPa

Jeigu transportavimas ir laikymas trunka ilgai, atsižvelkite į toliau nurodytas sąlygas.

	<b>Laikymas</b>	<b>Transportavimas</b>
Temperatūra (rekomenduojama)	Nuo 10 iki 25 °C (nuo 50 iki 77 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Temperatūra (didžiausias diapazonas)	Nuo 10 iki 40 °C (nuo 50 iki 104 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Santykinis drėgnis (rekomenduojama)	Nuo 20 iki 80 %	Nuo 5 iki 90 %
Santykinis drėgnis (didžiausias diapazonas)	Nuo 10 iki 80 %	Nuo 5 iki 90 %
Atmosferos slėgis	Nuo 700 iki 1060 hPa	Nuo 700 iki 1060 hPa

Atminkite, kad klausos aparatus reikia įkrauti bent kas 6 mėnesius. Klausos aparatus rekomenduojame įkrauti kas 3 mėnesius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Kitoms dalims, pvz., įkrovikliui, gali būti taikomos kitokios sąlygos.



### **ĮSPĖJIMAS**

Pervežant atsiranda sužeidimo, gaisro arba sprogimo pavojus.

- ▶ Ličio baterijas ir klausos aparatus pervežkite laikydamiesi vietinių nuostatų.

## Informacija apie įrenginio likvidavimą

- ▶ Kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite maitinimo elementų ar klausos aparatų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
- ▶ Maitinimo elementus ar klausos aparatus perdirbkite ar likviduokite laikydamiesi vietinių nuostatų.

## Šio dokumento simboliai



Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą nuosavybės žalą.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.

---

Made for

iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone“, „Made for iPad“

ir „Made for iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone, iPad arba iPod atitinkamai ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio prietaiso veikimą ir už saugos bei norminių standartų atitiktį. Atkreipiame dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPhone, iPad ar iPod gali pabloginti belaidžio ryšio veikimą.

## **Trikčių diagnostika**

### **Problema ir galimi sprendimai**

---

Silpnas garsas.

---

- Pagarsinkite.
  - Įkraukite klausos aparatą.
  - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
- 

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

---

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaikys.
  - Pritildykite.
  - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
- 

Garsas iškraipomas.

---

- Pritildykite.
  - Įkraukite klausos aparatą.
  - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
- 

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

---

- Įkraukite klausos aparatą.
- 

Klausos aparatas neveikia.

---

- Įjunkite klausos aparatą.
  - Įkraukite klausos aparatą. Taip pat stebėkite įkroviklio būsenos LED diodus.
- 

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

## **Su šalimi susijusi informacija**

### **JAV ir Kanada**

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

Motion C&G P X

- HVIN: RFM002
- Yra FCC ID: SGI-RFM002
- Yra IC: 267AB-RFM002



## **Techninė priežiūra ir garantija**

### **Serijos numeriai**

Kairė:

---

Dešinė:

---

### **Techninės priežiūros datos**

1: 4:

---

2: 5:

---

3: 6:

---

### **Garantija**

[sigijimo data:

---

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

---

### **Jūsų klausos specialistas**

---

 **Teisētas gamintojas**

WSAUD A/S

Nymoellevej 6

3540 Lyngø

Dānija

Document No. 04230-99T01-8X00 LT

Order/Item No. 109 908 40

Master Rev01, 10.2020

© 11.2020, WSAUD A/S. All rights reserved

  
0123

**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**